


CORRIDOIO DI PROGRESSIONE INTELLIGENTE




IntelliCorridor™

Per incontrare i desideri dell'attuale lifestyle, Shamir progetta il corridoio di progressione ottimizzando la zona di visione dedicata a tablet, smartphone e monitor pc senza compromettere visione e comfort nella zona per lontano e per vicino.

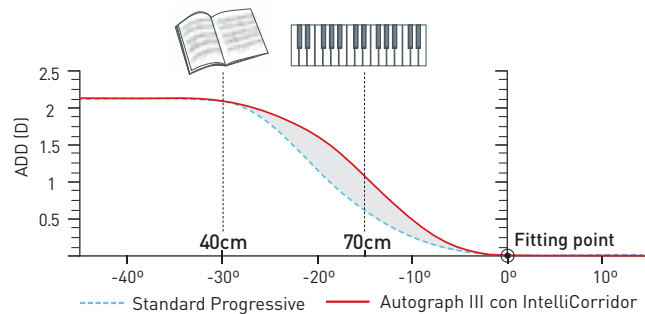

PAL TRADIZIONALE

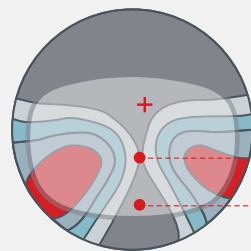



LENTE PLANO
con Add 2.00

Monitor PC,
add 1.00 D
Lettura,
add 2.00 D

PROGRESSIVA AUTOGRAPH III®

LENTE PLANO
con Add 2.00

Monitor PC
Tablet,
Smartphone
add 1.25 D
Lettura,
add 2.00 D

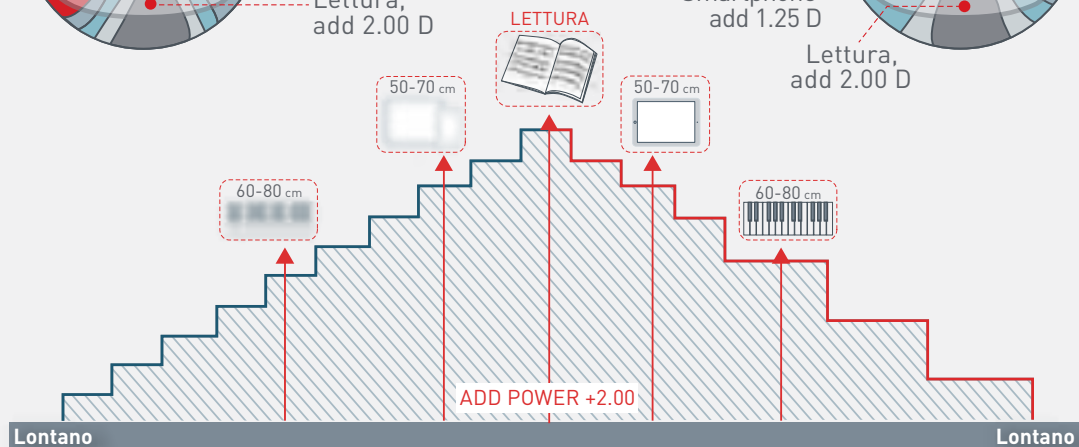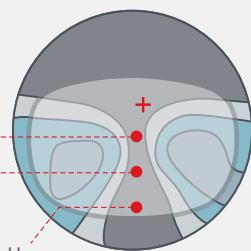

RISULTATO FINALE

UN SIGNIFICATIVO PASSO AVANTI NELLA VISIONE
CON LA NUOVA GENERAZIONE DELLE LENTI PROGRESSIVE



SHAMIR RX ITALIA s.r.l.
Via Castelmorrone, 72
35138 PADOVA
Tel. 049 723102-3
fax 049 723087
shamir@shamir-rx.it

Via Mazzucotelli, 4
24020 GORLE (BG)
Tel. 035 299883
fax 035 4236041
shamirbg@shamir-rx.it

www.shamir.com

SHAMIR AUTOGRAPH III®

A new
visual
experience



SHAMIR



Eye-Point Technology III®
**RICREA UNA
VISIONE NATURALE
DEL MONDO**



Natural Posture™
**GARANTISCE
L'ERGONOMICITÀ
DELLA POSTURA**



IntelliCorridor™
**OFFRE UN CORRIDOIO
DI PROGRESSIONE
INTELLIGENTE**



As-Worn Quadro™
**RICALCOLA IL
POTERE E RIADATTA
IL DESIGN**




Eye-Point Technology III®

Grazie ad Eye-Point Technology III® Shamir innova la progettazione della lente progressiva prendendo come punto di partenza la definizione delle dimensioni reali dell'oggetto osservato. Il design della lente cambia in funzione del potere della lente stessa e offre un'innovativa esperienza di visione a tutti i portatori.


• CON LA TECNOLOGIA PRECEDENTE:

Diversi campi di visualizzazione per i portatori ipermetropi o miopi

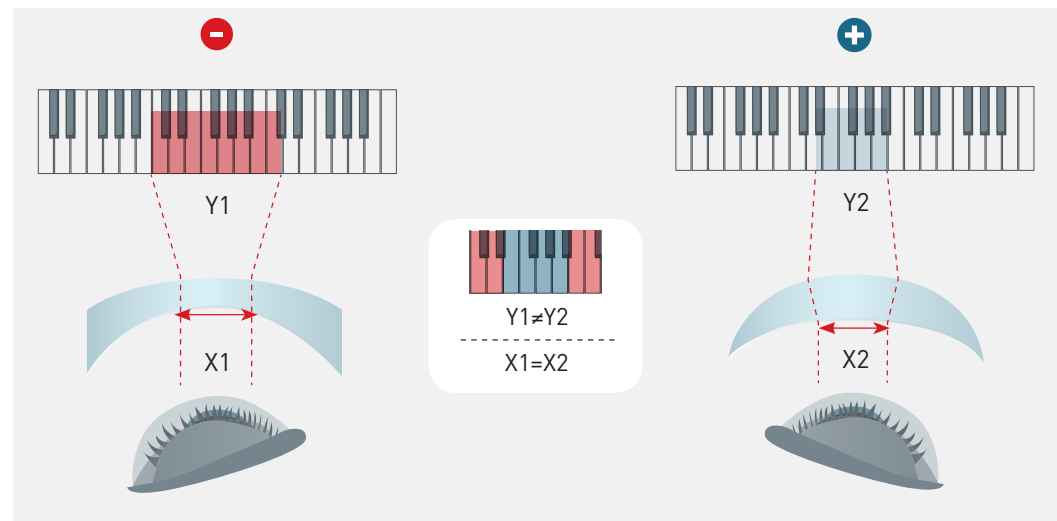

• CON EYE-POINT TECHNOLOGY III:

Campi di visualizzazione simili per i portatori ipermetropi o miopi

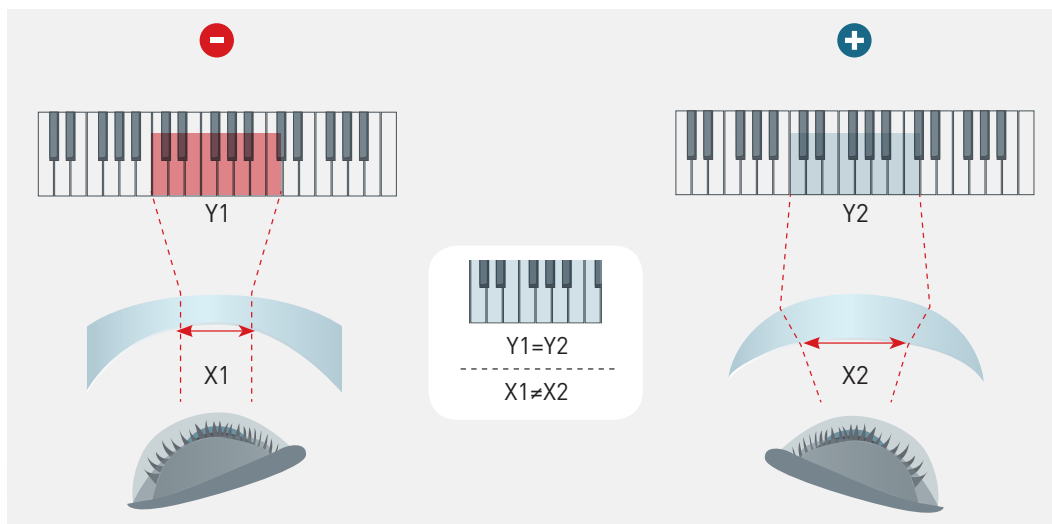


VISTA DALL'ALTO




Natural Posture™

Il controllo personalizzato del prisma di alleggerimento permette di correggere posture scomode e innaturali nella lettura e nella visione prossimale.

• POSIZIONE DEL CAPO CON LA TECNOLOGIA PRECEDENTE

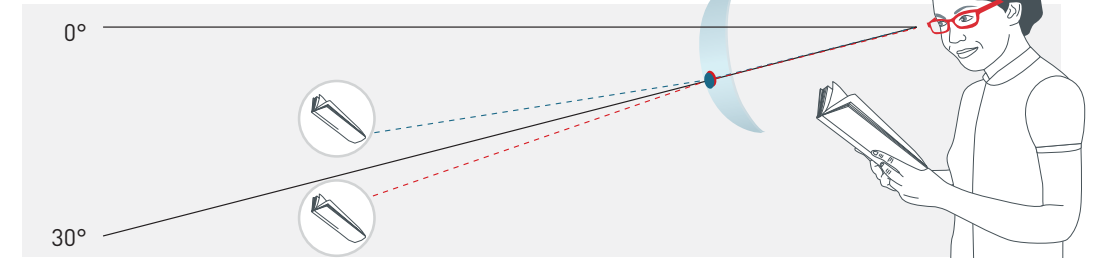

• CON AUTOGRAPH III LA POSIZIONE DEL CAPO È NATURALE E CONFORTEVOLE

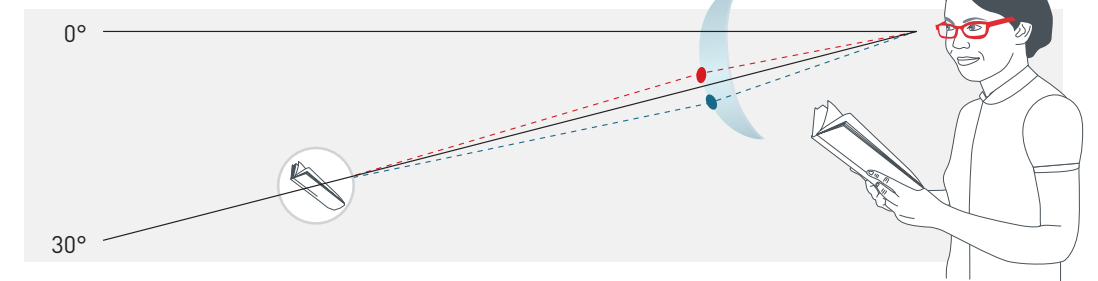

⊖ LENTE NEGATIVA - - - - - ⊕ LENTE POSITIVA - - - - -



As-Worn Quadro™

La tecnologia di ricalcolo As-Worn assicura al portatore di progressive la stessa percezione della prescrizione effettuata dall'optometrista. Con il nuovo As-Worn Quadro™ i design si moltiplicano per quattro garantendo la stessa qualità di visione con montature di caratteristiche molto diverse tra di loro.

AS-WORN QUADRO™	Face-form Angle	Pantoscopic	AS-WORN™
	5°	0°	
	9°	6°	
	10°	8°	
	12°	12°	